




déCOLITE



the beauty specialists



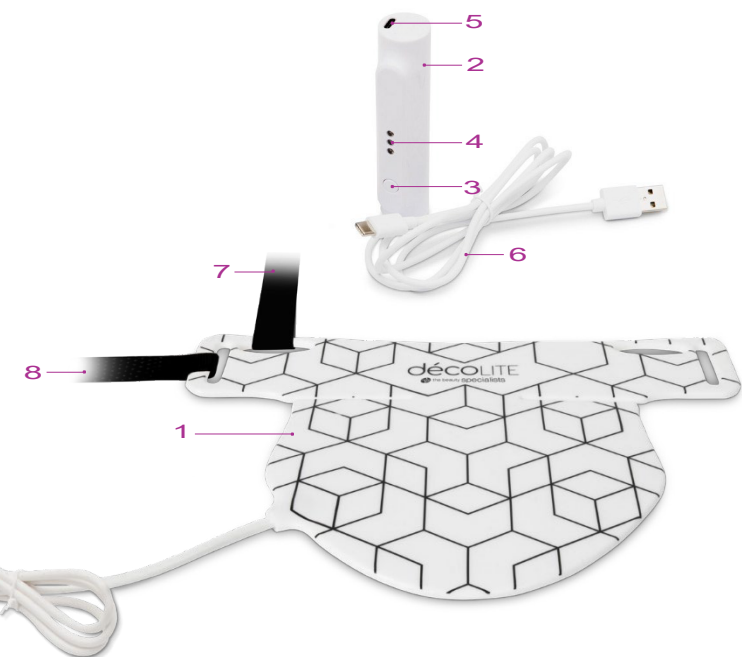

UPOZORENJA

- **Molimo da temeljito pročitate sve upute i zadržite za buduću uporabu.**
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj se smije napajati samo pri sigurnosti iznimno niskog napona koji odgovara oznaci na uređaju. Ako je oštećen bilo koji dio mrežnog adaptera ili kabela, prekinite uporabu. Obratite se službi za korisnike kako biste dogovorili zamjenu.
- Ne uranjajte proizvod u vodu. NEMOJTE koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- NEMOJTE koristiti ovaj proizvod ako ne radi ispravno ili ako je pao ili je oštećen.
- NEMOJTE koristiti décoLITE ako uzimate bilo kakve lijekove koji mogu uzrokovati fotoosjetljivost. Ako koristite décoLITE i uzimate bilo koji lijek koji može uzrokovati fotoosjetljivost, možete izazvati ozbiljnu kožnu reakciju.
- Fotoosjetljivost je česta nuspojava raznih lijekova. Može se raditi o određenim antibioticima, lijekovima za kemoterapiju i diureticima. Ukoliko niste sigurni kakve lijekove uzimate, obratite se svom liječniku.
- NEMOJTE koristiti décoLITE za liječenje bilo koje druge bolesti osim onih navedenih u indikacijama za uporabu.
- NEMOJTE koristiti décoLITE ako ste trudni, planirate zatrudnjeti ili dojiti. décoLITE NIJE testiran na trudnicama ili dojiljama te je stoga rizik za fetus, novorođenčad ili trudnice nepoznat.

- NEMOJTE koristiti décoLITE LED sustav ako bolujete od sistemskog eritemskog lupusa , fotoosjetljivog ekcema ili albinizma. Ako koristite décoLITE LED sustav za liječenje sistemskog eritemskog lupusa, fotoosjetljivog ekcema ili albinizma, možete izazvati ozbiljnu kožnu reakciju.
- NEMOJTE koristiti décoLITE ako patite od bilo kojeg fotoosjetljivog poremećaja (senzibilizacija na svjetlo).
- Prije upotrebe décoLITE morate provesti test senzibilizacije.
- NEMOJTE koristiti décoLITE na bilo koji način koji nije točno naveden u ovim uputama za uporabu.
- ISKLJUČITE i UKLONITE décoLITE odmah ako je vruć ili osjećate neugodnu toplinu na koži.
- Koristite samo décoLITE s pripadajućim hidrogel jastučićima koji se preporučuju ili isporučuju za uporabu s décoLITE-om. Postoje i drugi jastučići, ali nisu testirani s décoLITE sustavom.
- NEMOJTE koristiti décoLITE bez prethodnog uklanjanja krema, losiona ili šminke. Neki sastojci ovih proizvoda mogu uzrokovati senzibilizaciju na svjetlo ili mogu smanjiti učinkovitost liječenja.
- NIKADA ne koristite décoLITE u blizini vode ili gdje se voda može proliti na proizvod. NEMOJTE koristiti décoLITE ako mislite da je došao u dodir s vodom.
- Držite décoLITE podalje od VRUĆIH površina.
- NE pokušavajte modificirati décoLITE na bilo koji način. Izmjena décoLITE poništava vaše jamstvo. DécoLITE ne sadrži dijelove koji se mogu servisirati.
- NEMOJTE koristiti décoLITE ako su rasvjetna podloga, kontroler, kabel za punjenje bilo kako oštećeni.
- DécoLITE remen sadrži mješavinu poliestera, najlona i likre. Ako ste alergični na bilo koji od ovih materijala, možda nećete moći koristiti priloženi remen za glavu.
- NEMOJTE koristiti decoLITE ako patite od glavobolja uzrokovanih svjetlom.

UPOZNAJTE SVOJ UREĐAJ

- | | | | |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Svjetlosni jastučić | 5 | USB-C utičnica |
| 2 | Upravljač | 6 | USB kabel za punjenje |
| 3 | On/Off | 7 | Dugi remen |
| 4 | LED indikator svjetala | 8 | Kratki remen |

BRZI TEST

Prije prvog tretmana morate provesti test osjetljivosti (brzi test).

1. Stavite décoLITE preko unutarnjeg dijela ruke.
2. Ako u bilo kojem trenutku osjećate VRUĆINU ili nelagodu na vašoj koži, ODMAH prestanite koristiti uređaj.
3. Nakon tretmana pričekajte najmanje 6 sati. Ako vam koža na unutarnjoj strani ruke izgleda crvena i/ili svrbi, décoLITE vam nije prikladan.

PUNJENJE


Za punjenje décoLITE umetnite USB-C kraj kabela za punjenje u upravljač. Umetnite USB priključak u USB napajanje. 3 LED diode na upravljaču početi će treperiti kako bi ukazivale na punjenje. Kada se potpuno napuni, sve tri LED diode će zasvijetliti.

Napomena: Uvijek stavite na ponovno punjenje kada posljednja LED lampica počne treperiti. décoLITE neće raditi tijekom punjenja.


POČETAK RADA

Prije svake uporabe, dok je uređaj isključen, očistite décoLITE svjetlosni jastučić. Pogledajte upute za čišćenje. décoLITE dolazi s podesivim remenom koji vam omogućuje udobno nošenje svjetlosnog jastučića.

Koristiti oko vrata i na prsima:

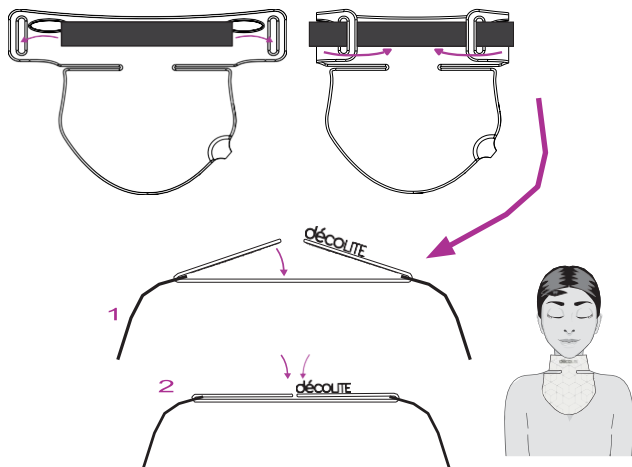

Koristiti samo na prsima:

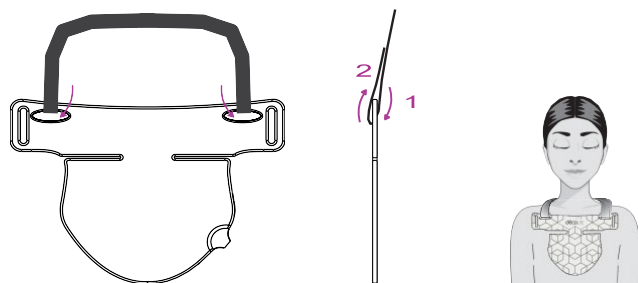

TRETMANI

Za najbolje rezultate koristite 3-5 dana u tjednu najmanje 4 tjedna. Tretmane održavanja treba provoditi prema potrebi, prema načinu života i stanju kože.

décoLITE Tretman:

1. Očistite i eksfolirajte kožu kako biste uklonili sve tragove preparate za njegu kože.
2. Kako biste namjestili svjetlosni jastučić, provucite remen kroz petlje s obje strane svjetlosnog jastučića i spojite dva dijela pomoću kuke i petlje (vidi sliku gore). Koristite kratki remen za stavljanje oko vrata te dugi remen (provlačeći ga kroz gornji otvor petlje) za stavljanje oko prsa.
3. Pritisnite tipku On/Off za uključivanje. Uređaj će se automatski isključiti nakon 10 minuta. Tretman možete zaustaviti u bilo kojem trenutku pritiskom tipke On/Off.
4. Na kraju tretmana uklonite svjetlosni jastučić.
5. Nanesite svoju uobičajenu hidratantnu kremu i kremu za sunčanje.

Napomena: Odmah nakon tretmana, koža može izgledati crvena. Trebala bi se vratiti u normalu u roku od 1-2 sata.

Tretman hidrogelom (po želji):

DécoLITE se može kombinirati s tretmanima hidrogelom za poboljšanje rezultata i koristi. Molimo pregledajte sve upute priložene uz pakiranje hidrogela.

ČIŠĆENJE

Prije svake uporabe, kada je uređaj isključen, očistite svjetlosni jastučić na sljedeći način:

1. Pazite da se uređaj NE puni prilikom čišćenja.
2. Očistite svjetlosni jastučić maramicom na bazi vode ili vlažnom čistom krpom. Tvrdokorne mrlje mogu se ukloniti laganim brisanjem sa sedamdeset postotnim alkoholom. NEMOJTE koristiti druge proizvode za čišćenje jer oni mogu oštetiti plastiku.
3. Očistite upravljač vlažnom čistom krpom.

SPREMANJE

Čuvajte décoLITE na sobnoj temperaturi u suhim uvjetima. Izbjegavajte spremanje decoLITE-a u prašnjavim uvjetima, na izravnom sunčevom svjetlu ili u vlažnim uvjetima.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Nema crvenog ili infracrvenog svjetla	Nije napunjen	Napunite upravljač
Nema crvenog ili infracrvenog svjetla	Uređaj se puni.	Isključite kabel za punjenje iz upravljača

ZBRINJAVANJE OTPADA



Direktiva o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) (2012/19/EU) donesena je zbog recikliranja proizvoda koji se koriste najboljim dostupnim tehnologijama za oporabu i recikliranje kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru, obradile opasne tvari i izbjegla sve veća odlagališta. Ovaj proizvod je klasificiran kao električna ili elektronička oprema, stoga vas molimo da osigurate da se na kraju vijeka trajanja ovog proizvoda on odloži na ispravan način u skladu sa zahtjevima lokalnih vlasti. NE smije se odlagati s kućanskim otpadom.

SPECIFIKACIJA

Ulaz upravljača: 5V 500mA 

Ulaz svjetlosnog jastučića: 5V 280mA (CC)



Ovaj je proizvod u skladu s važećim zakonodavstvom EU o proizvodima.



Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe, a zatim zadržite za buduću uporabu.



Ovaj proizvod je namijenjen samo za uporabu u zatvorenim prostorima.



Ovaj simbol znači da uređaj trebate držati podalje od izravnog sunčenog svjetla.



Istosmjerna struja



Ovaj proizvod NIJE prikladan za punjenje u kupaonici



Ovaj simbol označava USB priključak.



Ovaj simbol znači da ovaj proizvod koristi Litij-ionsku polimersku bateriju.



Ovaj se simbol odnosi na kataloški broj décoLITE uređaja.



Ovaj se simbol odnosi na šifru serije uređaja décoLITE.

Težina:

600g (upravljač i svjetlosni jastučić)

LED:

Crvena: 630nm+/-10nm.

Blizu infracrvene: 830nm+/-17.5nm

Ukupne dimenzije uređaja:

Svjetlosni jastučić: 300mm max (š) x 220mm max (v)

Upravljač: 23mm max (dia) x 104mm (d)

Program / trajanje tretmana:

10 minuta

Radna temperatura:

0°C to 40°C

Temperatura skladištenja i transporta:

-5°C to 55°C

Radna vlažnost:

30% to 95% bez kondenzacije

Vlažnost tijekom pohrane i prijevoza:

20% to 85% bez kondenzacije

BRIGA O KUPCIMA

Ako imate bilo kakvih pitanja, posjetite nas na: online@riobeauty.com

Kako biste ponovno naručili dodatke, molimo posjetite
www.riobeauty.com ili se obratite lokalnom distributeru.

GARANCIJA

Da biste registrirali dvogodišnje jamstvo putem interneta, posjetite:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

www.riobeauty.com



© The Dezac Group Ltd 2019 Manufactured by The Dezac Group Ltd PO Box 17,
Cheltenham, England GL53 7ET

Patents: GB 2 360 461, JP 4889247, EP 1 138 349, US6,645,230, EP 1 824 561,
GB 2 425 481, GB 2 416 699, EP 2 376 194, HK8101701.

1-IN-DCLT-EU/1.1

JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje. Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će:

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje neispravan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomenel!

- Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo ne pokriva slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, neispravne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak popravka proizvoda snosi kupac.
- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Tip/model proizvoda:

Serijski broj proizvoda:

Žig i adresa prodajnog mjesta s datumom prodaje:

Opis kvara:

Ime i prezime kupca:

Adresa kupca:

Zastupnik za Hrvatsku:

Medikor d.o.o.

Adresa: Jarušića 9E, Zagreb

Tel: 01 3689 666

e-mail: info@medikor.hr

www.shop-medikor.hr

Servis:

Medikor specijalizirana prodavaonica

Tratinska ulica 58, 10000 Zagreb

Tel: 01 3667 212

e-mail: servis@medikor.hr

Radno vrijeme servisa: pon – pet: 08:00 - 16:00h