

beurer

FB12

vodeni masažer stopala



Sadržaj

1. Upoznajte svoj uređaj	3	5. Korištenje uređaja	5
2. Pravilna uporaba.....	3	6. Održavanje i čuvanje	5
3. Sigurnosne napomene	3	7. Tehnički podatci	5
4. Opis uređaja.....	4	8. Zbrinjavanje.....	5



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



Poštovani kupci,

Iznimno nam je drago što se odabrali proizvod iz našeg asortimana. Naše ime je sinonim za visoku kvalitetu i pomno ispitane proizvode na području topline, tjelesne težine, krvnoga tlaka, tjelesne temperature, srčanog pulsa, blage terapije, masažera i uređaja za kvalitetu zraka.

Molimo, pažljivo pročitajte uputstva i sačuvajte ih za kasnije korištenje, pobrinite se da budu dostupna i ostalim korisnicima.

S poštovanjem,
Vaš Beuer

Predmeti uključeni u pakiranje:

- Masažer stopala
- Upute za rukovanje

UPOZORENJE

- Uređaj je namijenjen za kućnu / osobnu upotrebu, ne u komercijalne svrhe
- Uređajem smiju rukovati djeca starija od 8 godina kao i osobe s fizičkim ili mentalnim poteškoćama uz uvjet da su pod nadzorom ili su podučeni o sigurnosnom rukovanju te su svjesni mogućih rizika
- Uređaj nije namijenjen za igru.
- Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj bez nadzora.
- U slučaju oštećenja napajanja, kabel dajte na zamjenu proizvođaču, ovlaštenom servisu ili trećoj, jednako stručnoj osobi.
- Ako iz uređaja curi voda, ne bi se trebao više upotrebljavati.
- Tijekom rada, strana uređaja se zagrijava, osobe neosjetljive na toplinu moraju biti posebno oprezne.

Objašnjenje simbola

Sljedeći simboli se nalaze u ovim uputama:



UPOZORENJE

Upozorenje na opasnost od ozljede ili štetnog učinka na zdravlje.



PAŽNJA

Ukazuje na moguće oštećenje samog uređaja / dodatnog pribora.



Napomena

Važna informacija.



Uređaj posjeduje dvostruku izolaciju i pripada skupini elektroničkih uređaja klase 2.



Koristiti samo u zatvorenim prostorima.

1. Upoznajte svoj uređaj

Opće informacije

Naša stopala imaju izrazito važnu ulogu tijekom naših života: moraju nositi cijelu težinu tijela. Svako stopalo sadrži 26 kosti, 22 zgloba i 107 ligamenata i svima im je potrebna njega. Odabir Beuer masažera za stopala je prvi korak u pravom smjeru. Nježne vibracije masažera će opustiti napete mišiće i nakon samo nekoliko minuta osjećat ćete se opušteno i bez stresa. Taj se učinak pojačava djelovanjem kupelji s mjehurićima zraka. Savjet: dodajte amiku, ružmarin ili morsku sol za poticanje cirkulacije. Za još veće opuštanje stopala, dodajte lavandu ili majčinu dušicu u mlaku vodu kupelji.

Masažer sadrži:

- mjesto za stopala s masažnom podlogom,
- masažni nastavak
- 3 funkcije: vibracijsku masažu, masažu mjehurićima i kontrolu temperature vode.

2. Pravilna upotreba

Uređaj je namijenjen samo za stopala.



UPOZORENJE

Ne koristiti masažer:

- Ako imate promjene ili ozljede na području stopala (npr. otvorene rane, bradavice, gljivične infekcije)
- na životinjama
- duže od 40 minuta (opasnost od pregrijavanja) i ostavite ga da se ohladi barem 15 minuta prije ponovne upotrebe

Kontaktirajte svog liječnika u slučaju da:

- niste sigurni da li je masažer prikladan za vas
- ako patite od ozbiljne bolesti ili se oporavljate od operativnih zahvata na stopalima
- imate dijabetes ili tromboze
- ako imate medicinsko stanje nogu ili stopala (npr. proširene ili upaljene vene)
- trpite bol nepoznatog podrijetla

Uređaj je namijenjen za upotrebu naznačenu u ovim uputstvima. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili nemarom.

3. Sigurnosne napomene

Molimo pročitajte sljedeće napomene pažljivo. Nepridržavanje istih može dovesti do ozljede ili materijalne štete. Držite ove opute na sigurnom mjestu, dostupne svim korisnicima uređaja. U slučaju da darujete ili prodajete uređaj, obavezno prosljedite i uputstva.



Napomena

- Držite djecu podalje od sadržaja koji bi mogao dovesti do gušenja
- Prije upotrebe, provjerite da ne postoji nikakvo oštećenje na uređaju ili dodatnom priboru. Ako niste sigurni, kontaktirajte prodavača ili naznačeni servis
- U slučaju greške ili kvara, odmah ugasisite uređaj i isključite ga iz utičnice. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj: nestručnim popravcima možete dovesti sebe ili druge korisnike u opasnost
- Ne rastežite, savijajte i izvijajte električni kabel. Ne zabijajte igle, pribadače ili oštre predmete
- Na stavljajte ili provlačite električni kabel po oštrim predmetima
- Pripazite da je utičnica zaštićena od vlage ili vode
- Djeca moraju biti pod nadzorom prilikom uporabe uređaja
- Prilikom punjenja kupke uređaja, ne stavljajte uređaj pod tuš ili u kadu.
- Ne otvarajte uređaj
- U slučaju pada ili kakvog drugog oštećenja uređaja, nemojte ga više koristiti
- Popravke na električnim uređajima moraju vršiti za to osposobljene osobe. Nestručni popravci mogu dovesti do opasnosti za korisnika. U slučaju kvara, kontaktirajte našu službu za korisnike ili ovlaštenu servis

Električni udar



UPOZORENJE

Kao i svakim drugim električnim uređajem, masažerom treba rukovati pažljivo da bi umanjili rizik nastanka električnog udara.

Iz tog razloga, prilikom rukovanja pripazite da:

- Napon odgovara onome označenom za uređaj
- Ne koristite uređaj ako je na njemu ili na dodatnom priboru vidljivo oštećenje
- Ne koristite uređaj tijekom grmljavine

U slučaju greške ili kvara, odmah ugasite uređaj i isključite ga iz struje. Ne vucite uređaj ili kabel da bi ga isključili iz utičnice. Ne nosite ili držite uređaj za kabel. Držite kabel podalje od vrućih površina. Ne smijete uključivati uređaj u struju ako su vam noge već uronjene u kupku uređaja. Oštećenje uređaja može dovesti do, za život opasnog, električnog udara.

Pripazite da utičnica i električni kabel ne dolaze u kontakt s vodom ili drugim tekućinama. Iz tog razloga, pridržavajte se sljedećeg:

- Koristite samo u suhim prostorijama (ne koristiti u kadi ili sauni)
- Koristite samo sa suhim rukama

Nikad ne uranjajte uređaj u vodu. Ne pokušavajte dohvatiti uređaj ako padne u vodu. Odmah isključite uređaj iz struje.

Opasnost od požara

⚠ UPOZORENJE

Postoji opasnost od požara ako se uređajem ne rukuje pravilno ili ako se ne pridržavate navedenih uputa. Iz tog razloga, pripazite na sljedeće:


- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora, posebice u prisustvu djece
- Ne koristite uređaj ispod pokrivača kao što su deke ili jastuci
- Ne koristite uređaj u blizini goriva ili drugih zapaljivih materijala

Rukovanje

⚠ PAŽNJA

- Ugasite uređaj i isključite ga iz struje nakon svakog korištenja i prije čišćenja.
- Ne dovodite uređaj u kontakt s visokim temperaturama
- Nikad ne stojite u uređaju
- Uređaj ne smije biti uključen u struju prilikom punjenja
- Uvijek ugasite uređaj i isključite ga iz struje prije prenošenja ili čišćenja

4. Opis uređaja

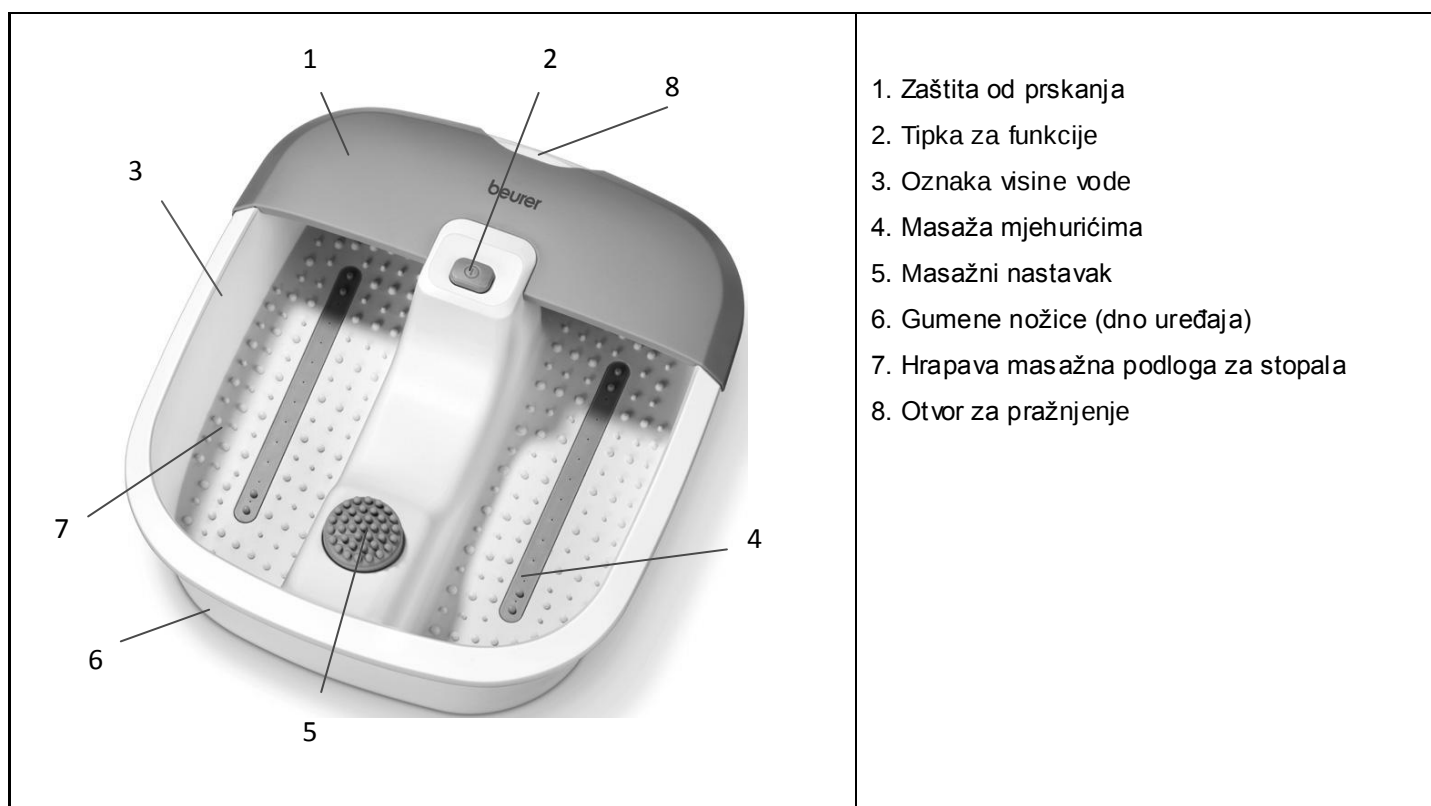

5. Korištenje uređaja

Pokretanje

- Maknite pakiranje
- Provjerite da uređaj i kabel nisu oštećeni .
- Prije uključivanja u struju, napunite do oznake visine vode (otprilike 4 cm) toplom ili hladnom vodom
- Kabel odložite sigurno, da nikome nije na putu.

Smjestite se udobno u stolicu i položite stopala na za njih predviđenu hrapavu podlogu te lagano pritisnite. Nikada nemojte ustajati dok su Vam stopala u uređaju. Gumene nožice na dnu uređaja sprječavaju njegovo klizanje.

Upalite uređaj: pritisnite tipku za funkcije označenu sa [2].

Vibracijska masaža, masaža mjehurićima i kontrola temperature vode počinju istovremeno.

Masažni nastavak

Masažni nastavak u sredini služi za ugodnu masažu stopala te poticanje cirkulacije. Može ga se maknuti prilikom čišćenja.

Napomena

- Masaža specifičnih točaka stopala može utjecati na odgovarajuće organe u tijelu. Međutim, savjetujemo da proučite relevantnu literaturu i upitate svog liječnika prije upotrebe masaže refleksnih zona da bi ostvarili željeni učinak.
- Grijač se nalazi ispod prostora za noge. Topla voda se može održavati uključivanjem grijača. Grijač nije namijenjen za grijanje hladne vode. Za ostvarivanje najpovoljnijih rezultata, preporučuje se da masaža ne traje dulje od 40 minuta.

Nakon upotrebe, ispraznite vodu kroz otvor za pražnjenje [8].

6. Održavanje i čuvanje

Nakon upotrebe isperite kupku uređaja čistom vodom. Kupka se može čistiti i blagim kućanskim sredstvom koje ne stvara pjenu, primjerice, prirodni ocat.

Da bi osušili prostor za dovod zraka, uključite masažu mjehurićima na otprilike 10 sekundi.

Kapljice vode koje izađu iz tog prostora obrišite krpom.

Napomena

- Pazite da voda ne dođe u unutrašnjost uređaja.
- Uređaj čuvajte u originalnom pakiranju na suhom mjestu.
- Ne ostavljajte uređaj na otvorenom kroz duže razdoblje.

7. Tehničke karakteristike

Radni napon 220-240 V ~ 50/60 Hz

Snaga: 60 W

8. Zbrinjavanje

Molimo zbrinite uređaj pridržavajući se odredbi zakona i Pravilnika o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom.

Za danje upite, kontaktirajte nadležna tijela.



Zastupnik za hrvatsku:

MEDIKOR d.o.o.

Jarušćica 9 e

10 000 Zagreb

Tel: 01/3689 666

e-mail: info@medikor.hr

Servis:

MEDIKOR d.o.o.

Fallerovo šetalište 22

10 000 Zagreb

Tel 01/3667212

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity, možete naći na internetu na adresi www.medikor.info

JAMSTVENI LIST

Hvala što ste kupili proizvod marke BEURER. Proizvod je izrađen s osobitom pozornošću od visokokvalitetnih materijala. Izrađen je tako da budete njime u cijelosti zadovoljni, pod uvjetom da njime rukujete ispravno i da ga održavate prema uputi o uporabi. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi **tri godine** od dana njegove kupnje. Obron jamči ispravnost konstrukcije, izrade i materijala. Unutar jamstvenog roka Medikor će o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravan proizvod ili njegove neispravne dijelove. Davalac jamstva se obvezuje u razumnom roku izvršiti popravak od dana prijave kvara.

Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom. Popravak ili zamjena Beurer proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

Jamstvo ne obuhvaća:

- a) troškove štete nastale u transportu
- b) troškove nastale zbog popravka od strane neovlaštenih osoba. Ukoliko bude potrebno obratite se ovlaštenom servisu.
- c) troškove povremene kontrole i održavanja;
- d) kvarove i trošenje pribora ili dodataka samoj glavnoj jedinici uređaja;
- e) oštećenja bilo koje vrste, uključivši ona nastala nezgodom ili neispravnim rukovanjem.
- f) jamstvo vrijedi samo ako se pošalje cijeli proizvod zajedno s jamstvenim listom i originalnim računom. Jamstveni list mora biti potpuno popunjen i Medikor pridržava pravo odbiti reklamaciju u slučaju i kakvih nejasnoća u navedenim podacima.

NAPOMENA: JAMSTVENI ROK NE OBUHVAĆA BATERIJSKE ULOŠKE

TIP/MODEL PROIZVODA

SERIJSKI BROJ PROIZVODA (na stražnjoj strani proizvoda):

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

Zastupnik za Hrvatsku:
MEDIKOR d.o.o.
Jarušića 9 e
10000 Zagreb
Tel: 01/3689 666
e-mail: info@medikor.hr

Servis:
MEDIKOR d.o.o.
Falerovo šetalište 22
10000 Zagreb
Tel: 01/3667 212

BEURER - 3

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity
Možete naći na internetu, na adresi
www.medikor.info