

LIFT PLUS™

60 SECOND FACE LIFT

Upute za uporabu



the beauty specialists

!UPOZORENJE (MJERE OPREZA)

- **Molimo pročitajte sve upute detaljno i sačuvajte ih za buduću upotrebu.**

Ovaj uređaj se može koristiti kod osoba sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, samo ako su pod nadzorom ili upućeni na korištenje aparata (uređaja) na siguran način i razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s aparatom. Čišćenje i održavanje uređaja ne bi smjelo biti rađeno od strane djece, bez nadzora.

!UPOZORENJE (MJERE OPREZA)


- Uređaj NE SMIJETE KORISTITI ako ste trudni ili ako imate bilo koje od navedenog: ugrađeni elektrostimulator srca (pacemaker), ako bolujete od srčane bolesti/poremećaja, ako primате terapiju za liječenje niskog krvnog tlaka, epilepsiju, multiplu sklerozu, ili se oporavljate od operativnog zahvata.
- Posebno pripazite na kontaktno mjesto kuglaste elektrode kada se kreće u blizini oka. Uvjerite se da je kuglasta elektroda koja dodiruje kožu najmanje 1 cm od oka u svakom trenutku.
- Uređaj ne smijete koristiti na područjima kože s poremećajima kao što su: rosacea, gnojna akna, površinske ozljede kože, osjetljiva koža, ili preko ožiljaka, madeža ili proširenih vena.
- Ako provodljivi gel ili flasteri slučajno dospiju u oči, odmah oči obilno treba isprati vodom. Ako se iritacija očiju nastavi, zatražite savjet liječnika.
- Držati van dosega djece i kućnih ljubimaca.



”za prirodni
face lifting”

ZNANOST

Kako starimo, naši mišići lica gube tonus i bore postaju više definirane (izražene). Elektrostimulator mišića lica Rio Lift Plus kombinira dvije salon tehnologije kako bi pomogao u podizanju tonusa mišića, pomlađivanju lica i podizanju kože lica.

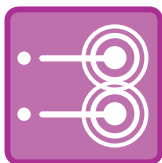


FARADIZACIJA je oblik elektroterapije u kojoj se koristi metoda elektrostimulacije mišića (EMS). Električni impulsi odrađuju sav naporni rad umjesto Vas dok nježno podižu tonus mišića, učvršćuju opuštene crte lica, te pomlađuju kožu.



IONTOFOREZA je oblik elektroterapije u kojoj se koriste transdermalni flasteri s kolagenom i retinolom. Flaster sadrži djelatne tvari koje se oslobađaju i apsorbiraju duboko u kožu radi smanjivanja pojave sitnih linija i bora, te povećanja elastičnosti kože.

UPOZNAJTE SVOJ LIFTING UREĐAJ

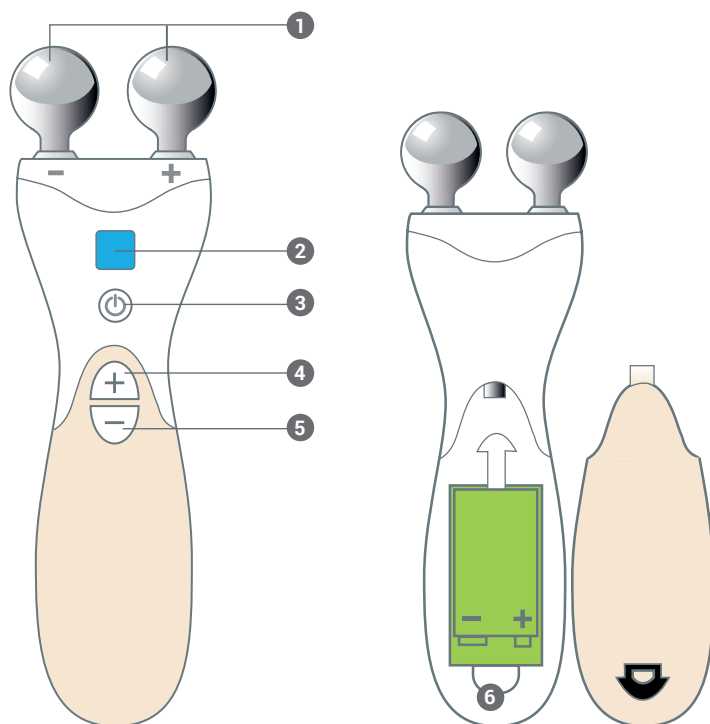

SADRŽAJ PAKIRANJA

1. Kuglaste elektrode (-) i (+)
2. LCD zaslon
3. Gumb Program/Uključi/Isključi
4. Gumb za povećanje razine jakosti (+)
5. Gumb za smanjenje razine jakosti (-)
6. Baterijski pretinac

UPOZNAJTE SVOJ LIFTING UREĐAJ

LCD ZASLON



Programi se prikazuju 'P' nakon čega slijedi broj programa.



Razina inteziteta se prikazuje kao što je prikazano.

Kratkim pritiskom na (+) ili (-) tipke promijeniti ćete razinu intenziteta u pojedinačnim koracima.

Ako držite (+) ili (-) tipke brzo ćete se kretati kroz razine intenziteta.


Plavi LCD zaslon će ostati upaljen 5 sekundi, a zatim se isključiti ako nema pritiska na tipke.

Automatsko isključivanje: uređaj će se automatski isključiti nakon 30 minuta, ako ga pritom ne koristite. Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i ugasiti.

60 sekundi mjerač: uređaj će se oglasiti svaki 60 sekundi ukazujući da je ciklus tretmana završen.

UPOZNAJTE SVOJ LIFTING UREĐAJ

UPUTE O BATERIJI

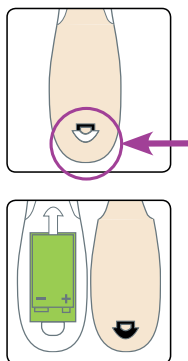

Za umetanje baterije u baterijski pretinac, povucite zaštitnu kvačicu i otvorite poklopac. Uložite alkalnu bateriju od 9V tip PP3 tako da oznaka polariteta + na bateriji bude usklađena s oznakom u baterijskom pretincu. Pritom pazite da vrpca za vađenje baterije ostane ispod baterije. Zatim vratite poklopac tako da u potpunosti prijanja na baterijski pretinac.

- Ukoliko uređaj na dulje vrijeme ne namjeravate koristiti, izvadite bateriju.
- NE SMIJETE koristiti punjive baterije.
- Prazne, istrošene baterije ne bacajte u komunalni otpad. Molimo odložite ih u posebno predviđene spremnike za odlaganje starih baterija.

KOŽNI TEST ✓


VAŽNO: UVIJEK ispitajte djelovanje provodljivog gela na manje vidljivom dijelu kože, zbog moguće alergijske reakcije kože. Pričekajte 24 sata. Ako dođe do iritacije kože, odmah prekinite s tretmanom.

Također, ako dođe do alergijske reakcije prilikom prve primjene flastera s kolagenom i retinolom, odmah prekinite s tretmanom.

PROGRAMI I TRETMANI

Program	Tretman	Tehnologija	Razina inteziteta	Gel / Flasteri
P1	UČVRŠĆIVANJE - Ritmične mišićne kontrakcije u trajanju od 2 sekunde za oblikovanje mišića uz kratku stanku od 3. sekunde između svakog električnog impulsa.	 Faradička	1-20	Provodljivi gel
P2	PROŠIRENO UČVRŠĆIVANJE - Nudi produženu mišićnu kontrakciju s unaprijed programiranim intenzitetom kako bi se pojačao/povećao učinak.	 Faradička	1-20	Provodljivi gel
P3	PODIZANJE TONUSA LUPKANJEM - Brza elektrostimulacija mišića koja oponaša pokrete lupkanja koji se primjenjuju kod dubinske masaže. Pulsirajuća, lupkajuća masaža traje 5 sekunda, potom slijedi stanka u trajanju od 3 sekunde.	 Faradička	1-20	Provodljivi gel
P4	INFUZIJA - Iontoforeza infuzija koristi struje male jakosti kako bi se unijele djelatne tvari pripravka za obnovu kože duboko u kožu, te se na taj način koža oporavlja i pomlađuje.	 Galvanska	1-10	Provodljivi gel i flasteri

FARADIZACIJA

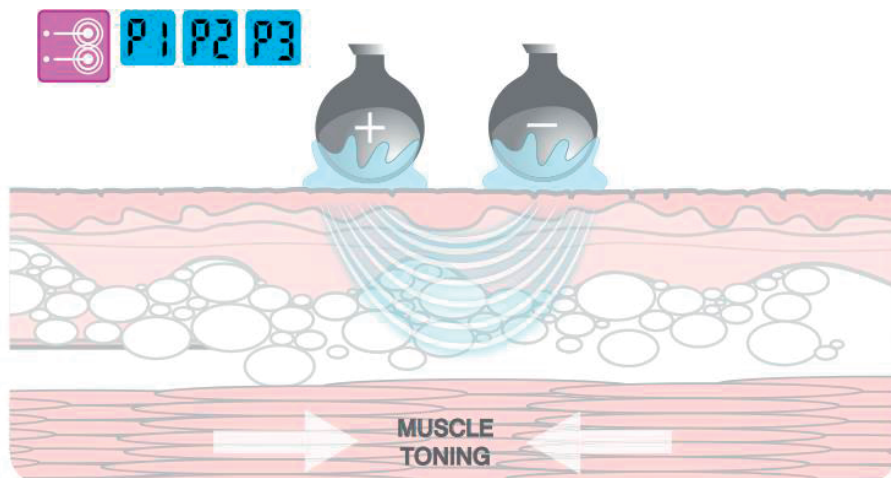

Faradizacija je oblik elektroterapije koja se u kozmetičkim salonima primjenjuje preko 40 godina, pri čemu se elektrostimulacijom mišića (EMS) postiže blaga kontrakcija i opuštanje mišića lica te njihovo podizanje, učvršćivanje i podizanje tonusa. Ovaj način elektrostimulacije među ostalim pojačava lokalnu cirkulaciju, opskrbljujući kožne stanice s više kisika, te brže uklanja toksine.

FARADIZACIJA



TRETMAN

Za najbolje rezultate preporučujemo slijediti tretman faradizacije svaki dan prvih nekoliko tjedana, naizmjenice programe 1, 2 i 3 svaki dan. Nakon toga perioda, korištenje je potrebno za održavanje dobrog tonusa.

ŠTO MOŽETE OČEKIVATI DA ĆE TE OSJETITI?


Na početku tretmana osjetit ćete lagano bockanje električnih impulsa, a kako se intenzitet povećava, primijetit ćete i kontrakcije mišića.

- Tijekom tretmana, mogli biste osjećati osjetljivost zuba, što je sasvim uobičajena pojava
- Učinkovita tonifikacija i učvršćivanje lica temelji se na laganoj i blagoj stimulirajućoj masaži mišića lica. Ukoliko za vrijeme tretmana elektrostimulacijom osjetite i najmanju nelagodu, trebali biste nanijeti više provodljivog gela, smanjiti intenzitet pritiskom na gumb (-), ili premjestiti uređaj s područja na kojem se vrši tretman.
- Za elektrostimulaciju mišića čela obično je potrebno odabrati višu razinu intenziteta. Pritisnite gumb (-) nekoliko puta prije premještanja uređaja na drugo područje lica.

FARADIZACIJA

PODRUČJA ZA TRETMAN FARADIZACIJOM

Napomena: Tijekom tretmana koristite zrcalo radi lakšeg određivanja položaja uređaja.

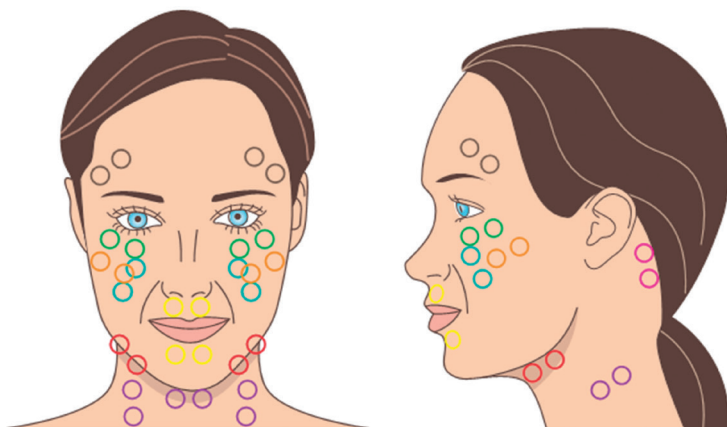

● ČELO I OBRVA

● PODRUČJE ISPOD OKA

● OBRAZI

● PODRUČJE NOSA I USANA

● DONJA USNA

● GORNJA USNA

● BRADA

● VRAT


● PODRUČJE IZA UHA

FARADIZACIJA



ČELO I OBRVA

Jednu elektrodu namjestite odmah iznad završetka obrve, u sredini između obrve i ruba rasta kose. Uređaj namjestite ukoso tako da druga elektroda bude smještena u sredini između obrve i ruba rasta kose.

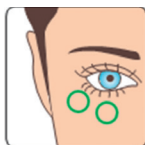

PODRUČJE ISPOD OKA

Kao vodič za postavljanje elektroda koristite rub gdje se nježna koža ispod oka spaja s očnom dupljom. Postavite jednu elektrodu na taj rub i točno ispod sredine oka. Druga elektroda bi trebala pratiti vanjski obris.



OBRAZI

Postavite elektrode ispod jagodične kosti i prateći dijagonalnu liniju jagodične kosti. Možda ćete morati lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili dovoljno snažnu kontrakciju uz manje peckanja.



PODRUČJE NOSA I USANA (nazolabijalno područje)

Nazolabijalne bore javljaju se između nosa i kutova usta. Postavite jednu elektrodu na najispupčeniji dio jagodice obraza, a drugu dijagonalno ispod nje prateći prirodnu liniju, tako da stoje paralelno s nazolabijalnim linijama. Ponovno napominjemo, možda ćete morati

FARADIZACIJA

lagano prilagoditi položaj uređaja kako bi odredili najbolji položaj za elektrode za vaše lice, koji ćete naći kada budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića.




GORNJA I DONJA USNA

Postavite elektrode simetrično odmah iznad ruba usne. Pojačajte intenzitet kako biste dobro osjetili kontrakciju. Ponovite postupak odmah ispod donje usne. Ako Vam se učini da se usne povlače nejednako u jednu stranu, to je sasvim uobičajena pojava.



BRADA

Pratite nazolabijalnu liniju dijagonalno prema dolje i postavite elektrodu s obje strane nazolabijalne linije na rub vilice. Povećajte intenzitet dok ne nađete najbolji položaj. Možda ćete morati lagano podesiti položaj.

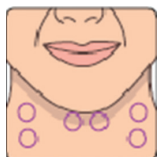

VRAT


Postavite elektrode u pravcu ispod ušne resice. Za postizanje najboljeg položaja, držite elektrode u okomitom pravcu, ali uređajem lagano klizite prema naprijed ili natrag dok ne budete osjetili najsnažniju kontrakciju mišića. Premjestite uređaj prema sredini vrata odmah ispod vilice. Povećajte intenzitet i uređajem lagano klizite prema natrag dok ne nađete najbolji položaj.

FARADIZACIJA




PODRUČJE IZA UHA

Postavite elektrode odmah do ruba rasta kose najviše što možete a da pritom ne dodirujete uši. Ovaj je položaj odličan za snažnu kontrakciju kroz cijeli vrat.

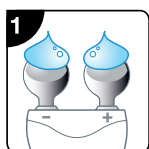

1. KORAK

Na obje elektrode nanesite obilnu količinu provodljivog gela kako bi kontakt s kožom bio što bolji.

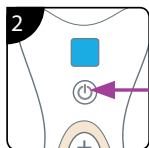

2. KORAK

Pritisnite tipku On / Off 3 sekunde za uključivanje. Nakon što se uključi, uređaj će se oglasiti i plavi LCD zaslon će biti osvijetljen. Uređaj će započeti s radom u Programu 1. Više puta pritisnite tipku On / Off za odabir željenog programa. Programi 1-3 su za faradizaciju.


Napomena: Svaki put kada promijenite program intezitet se spušta na 1.



3. KORAK

Obje elektrode postavite na čistu kožu prvog područja odabranog za tretman.

FARADIZACIJA

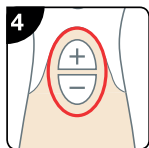

4. KORAK

Povećajte razinu intenziteta pritiskom na gumb (+), i prema potrebi premjestite elektrode dok ne osjetite mišićnu kontrakciju. Ukoliko se ne osjećate ugodno, smanjite jakost pritiskom gumba (-). Pritiskom na tipku/gumb (+) ili (-) brzo će te regulirati razinu intenziteta. Postoji 20 razina inteziteta. Razina inteziteta je prikazana na LCD zaslonu.



5. KORAK

Uređaj zadržite na istom mjestu u trajanju od 60 sekundi kako bi tretman tog područja bio izveden u cijelosti. Nakon 60 sekunda uređaj će se oglasiti kako bi vam signalizirao da prijedete na sljedeće područje tretmana.

Važno: Smanjite razinu inteziteta prije prelaska na sljedeće područje tretmana.




6. KORAK


Kako bi nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i 3 sekunde držite gumb Program/Uključi /Isključi pritisnutim. Uređaj će se oglasiti kratkim signalom i isključiti.

FARADIZACIJA

Korištenjem uređaja Lift Plus vjerojatno ste svjesni rada određenih mišića. Glavni mišići su prikazani na slici.

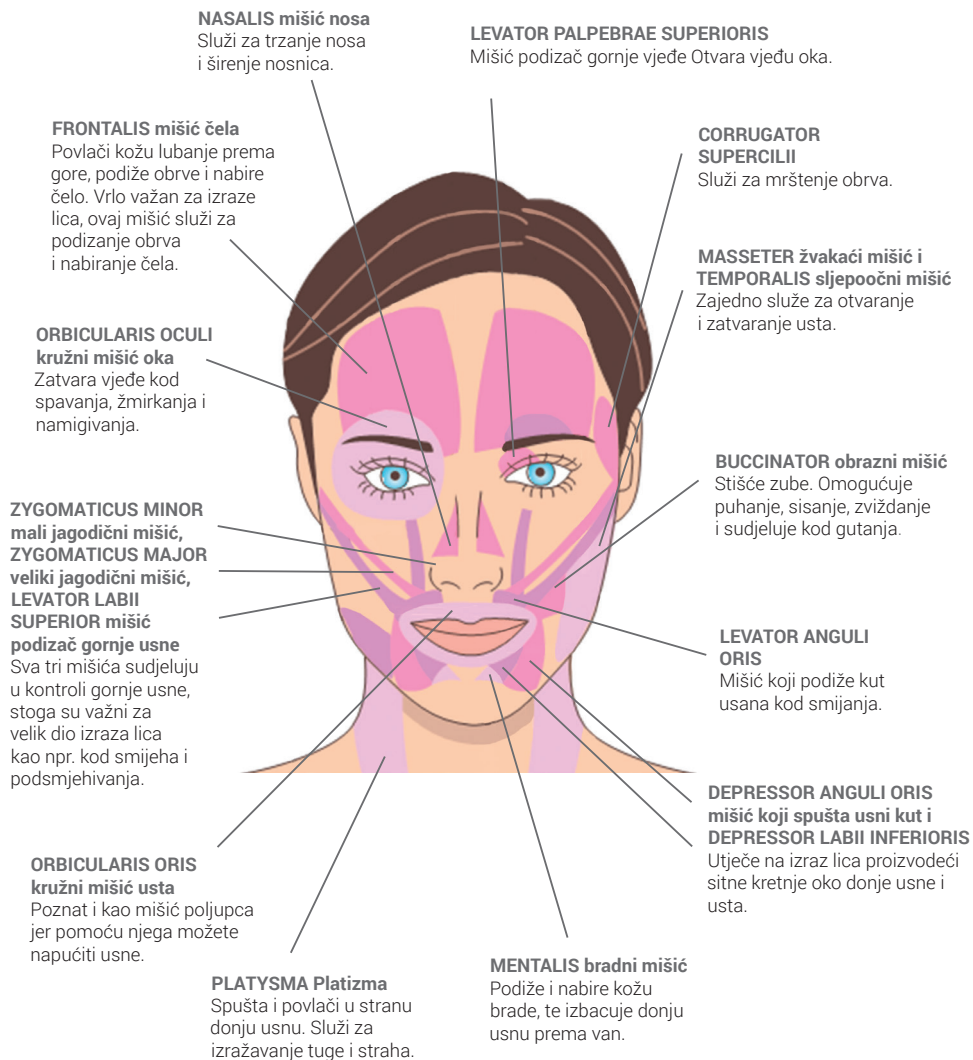

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

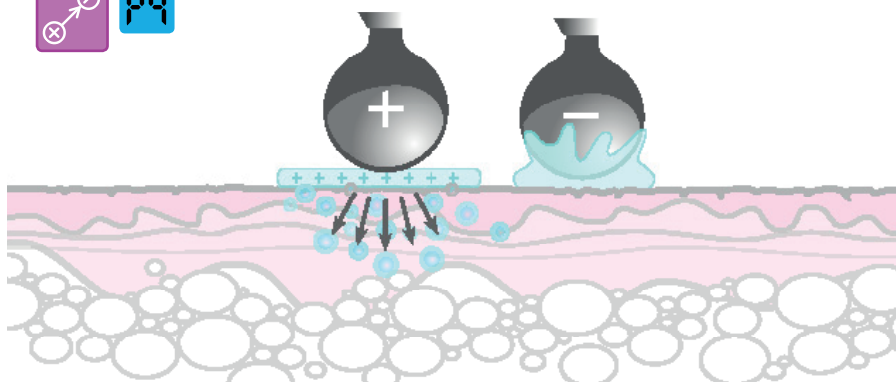


Lift Plus transdermalni flasteri sadrže pozitivno nabijen kolagen i retinol kao sredstvo protiv bora i starenja. Postavljanjem pozitivnog kontakta na flaster i negativnog kontakta na kožu ti aktivni sastojci se izravno unose u kožu.

TRETMAN

Preporučujemo tretman transdermalnim flasterima s kolagenom i retinolom samo jednom u 24 sata. Ako imate osjetljivu kožu, preporučujemo razmak od 48 sati između tretmana.

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

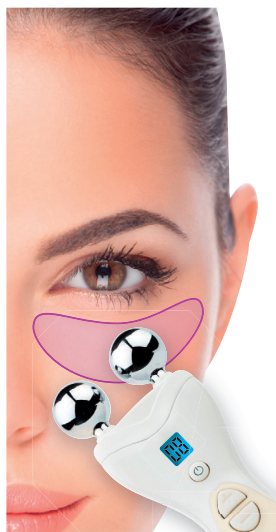

ŠTO MOŽETE OSJETITI TIJEKOM TRETMANA?

Transdermalni flasteri oblikovani su tako da pristaju na područje ispod oka, preko čela, oko usta i preko brade. Tijekom programa oslobađanja i apsorpcije pripravka, osjetit ćete neprekidne i brze električne impulse.

Preporučujemo Vam da započnete s najnižom razinom intenziteta za svako područje tretmana, te da postupno pojačavate intenzitet dok ne osjetite snažno peckanje.

INFORMACIJE O TRANSDERMALNIM FLASTERIMA


- Najučinkovitiji dio oslobađanja i apsorpcije djelatnih tvari iz flastera događa se u prvih 5-15 minuta za svako pojedino područje tretmana. Međutim, flasteri mogu ostati na licu i do sat vremena.
- Retinol brzo gubi svoja svojstva, stoga Vam savjetujemo da flastere držite na hladnom i suhom mjestu, te podalje od djelovanja sunčevih zraka. Možete ih čak spremati i u hladnjak, kako biste za tretman imali rashlađen flaster s pripravkom.
- Retinol može prouzročiti pojačanu osjetljivost kože na sunce. Nakon tretmana pomoću transdermalnih flastera preporučujemo primjenu kreme s visokim zaštitnim faktorom

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

protiv djelovanja sunčevih zraka.


- Pazite da flasteri dobro prijanjaju na kožu lica prije početka tretmana kako se ne bi odlijepili.
- Prilikom prelaženja s kuglastim elektrodama uređaja preko flastera i kože koristite laganije pokrete.
- Transdermalni flasteri namijenjeni su isključivo za jednokratnu uporabu.

PODRUČJA ZA TRETMAN IONTOFOREZOM:

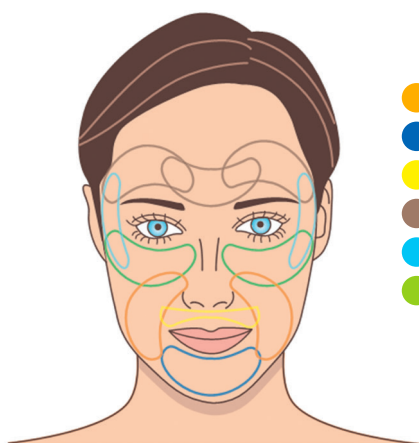


- PODRUČJE IZMEĐU NOSA I USTA
- BRADA
- GORNJA USNA (flaster s pregibom)
- ČELO
- BORE 'SMIJALICE'
- ISPOD OKA

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

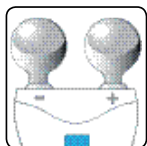


VAŽNO: Kod programa oslobađanja i apsorpcije pripravka morate voditi računa o polaritetu elektroda. Pozitivna elektroda (+) mora biti na flasteru, dok negativna elektroda ostaje na koži.

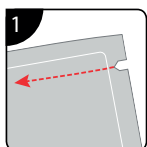


1. KORAK

Koža mora biti čista i suha. Vrh vrećice s flasterom otkinite po perforiranom rubu. Izvadite flaster iz plastičnog omota i odlijepite zaštitinu traku s flastera.

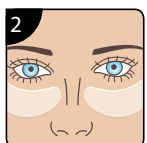

2. KORAK


Stavite jedan flaster na željeno područje tretmana. Drugi flaster stavite na suprotnu stranu lica.

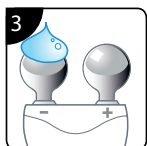

3. KORAK


Nanesite obilnu količinu provodljivog gela na (-) kuglastu elektrodu. Uvijek nanesite dosta provodljivog gela kako bi elektrode što bolje prijanjale na kožu.

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

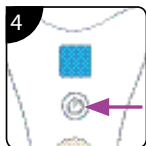


4. KORAK

Pritisnite tipku On / Off 3 sekunde za uključivanje. Nakon što se uključi, uređaj će se oglasiti i plavi LCD zaslon će biti osvijetljen. Uređaj će početi sa Programom 1. Ponovno pritisnite na Tipku On / Off za odabir programa 4.

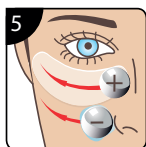


5. KORAK

Držeći negativnu elektrodu na koži, a pozitivnu elektrodu na flasteru, polako i lagano prelazite naprijed i natrag preko flastera. Pojačajte intenzitet pritiskom na tipku (+) dok ne osjetite ujednačeno peckanje. Možete birati između 10 razina intenziteta.

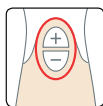

Napomena: Ako su u bilo kojem trenutku trnci neugodni, smanjite intenzitet pritiskom na tipku/gumb (-) . Pritiskom na tipku/gumb (+) ili (-) brzo će te regulirati razinu intenziteta.

GALVANSKA INFUZIJA (IONTOFOREZA)

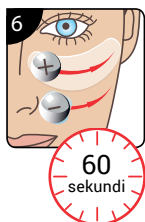

6. KORAK


Polako i lagano prelazite naprijed i natrag preko flastera u trajanju od 60 sekunda. Nakon 60 sekundi, uređaj će se oglasiti što znači da bi trebali prijeći na drugi flaster.



7. KORAK

Ponovite postupak i preko drugog flastera. Nastavite tretman naizmjenice na jednom i drugom flasteru oko 10–30 minuta

Napomena: Flastere možete ostaviti na licu najviše sat vremena kako bi se apsorpcija lagano nastavila. Nakon što uklonite flaster, ostatak pripravka možete utrljati u kožu.

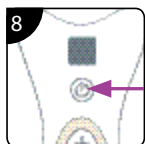

8. KORAK

Kako biste nakon uporabe uređaj isključili, pritisnite i 3 sekunde držite gumb On/Off pritisnutim. Uređaj će se oglasiti i isključiti.

OPĆE INFORMACIJE

- Čistoću uređaja održavajte brisanjem pomoću vlažnog ubrusa. NE SMIJETE koristiti otapala ili deterdžente.
- Uređaj NE SMIJETE uranjati u vodu.
- Uređaj NE SMIJETE rastavljati ili popravljati. Korisnik NE SMIJE samostalno vršiti popravke dijelova uređaja. Ukoliko imate problema s radom uređaja, zatražite savjet ovlaštenog distributera i zastupnika.
- Ako uočite kvar ili oštećenje uređaja, nemojte ga koristiti.
- Uređaj NE SMIJETE rabiti u blizini drugih uređaja koji u radu odašilju kratke valove ili mikrovalove.
- Ukoliko uočite neočekivane probleme u radu uređaja, postoji mogućnost da se radi o vanjskim elektromagnetskim smetnjama, npr. zbog rada drugih električnih motora/zvučnika. U tom slučaju, premjestite uređaj i ponovno ga uključite kako bi uređaj mogao u potpunosti i nesmetano nastaviti s radom.

ZBRINJAVANJE DOTRAJALOG UREĐAJA



Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, EE otpad ne smijete odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, već imate obvezu takav otpad prikupiti odvojeno.

Radi sprječavanja mogućeg štetnog utjecaja na okoliš ili na zdravlje ljudi, molimo Vas da EE otpad odvojeno prikupite te da ga predate ovlaštenoj osobi za skupljanje EE otpada, da bi se omogućila ponovna uporaba, rastavljanje i oporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.

Molimo da dotrajali uređaj odložite na otpad prema važećim zakonskim odredbama o odlaganju električnog i elektroničkog otpada.

Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima i otisnuta je na proizvodu ili na popratnoj dokumentaciji. (Informacije o zbrinjavanju EE otpada zatražite pozivom na besplatni broj 0800 444 110, ili na www.eeotpad.com).

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Za sve dodatne informacije o uporabi uređaja i uvjetima jamstva, obratite se ovlaštenom distributeru i zastupniku.

Izjavu o sukladnosti, declaration of conformity možete naći na internetu, na adresi www.medikor.info

Zastupnik za RH

MEDIKOR d.o.o.
Jaruščica 9e, 10000 Zagreb
tel.: 01 3689 666
fax.: 01 3666 000
e-mail: info@medikor.hr
www.medikor.hr
www.shop-medikor.hr

Ovlašteni servis za RH:

Medikor d.o.o.
OIB: 67863378582
Adresa: Fallerovo šetalište 22, Zagreb
Tel: 00 385 1 3667 212
E-mail: servis@medikor.hr

JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

Hvala Vam što ste kupili Rio proizvod. Svi Rio proizvodi imaju garanciju u trajanju od 2 godine od dana kupnje.

Molimo Vas da čuvate račun i ovjereni jamstveni list kako biste mogli ostvariti pravo na popravak ili zamjenu proizvoda unutar jamstvenog roka. Jamstvo počinje teći od dana prodaje na malo, što se dokazuje ovjerenim jamstvenim listom (naziv i sjedište poduzeća koje je proizvod prodalo na malo, pečat, datum prodaje i potpis prodavatelja) te originalnim računom.

U jamstvenom roku Medikor d.o.o. se obvezuje da će:

1. Omogućiti dijelove potrebne za popravak proizvoda
2. Popraviti proizvod: Kupac šalje неисправan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja
3. Zamijeniti proizvod: Ukoliko se proizvod ne može popraviti biti će zamijenjen novim proizvodom. Kupac šalje неисправan proizvod u servisni centar o trošku prodavatelja.

Napomene!

- Jamstvo ne pokriva normalno trošenje i habanje proizvoda. Dijelovi koji su normalno podložni zamjeni nakon određenog vremena, nisu uključeni u jamstvo.
- Jamstvo ne pokriva slučajna oštećenja koja su rezultat nemara, неисправne i neoprezne uporabe, zanemarivanja uputstava ili uporabe proizvoda na drugačiji način od onog propisanog u uputstvima.
- Rio proizvod popravljiva isključivo Medikor d.o.o. Da biste ostvarili jamstvo potrebno je donijeti račun odnosno dokaz o kupnji proizvoda. Ukoliko kupac ne posjeduje račun trošak

JAMSTVENI LIST I UVJETI JAMSTVA

popravka proizvoda snosi kupac.

- Popravak ili zamjena Rio proizvoda tijekom jamstvenog roka neće produžiti jamstveni rok.

TIP/MODEL PROIZVODA:

SERIJSKI BROJ PROIZVODA:

ŽIG I ADRESA PRODAJNOG MJESTA S DATUMOM PRODAJE:

OPIS KVARA:

IME I PREZIME KUPCA:

ADRESA KUPCA:

PREPORUČUJEMO ZA VAS

Rio Eye Refresher

U dva tipa tretmana, zagrijavajuću termoterapiju i rashlađujuću krioterapiju ovaj uređaj rješava problem tamnih krugova oko očiju i naotečenosti osjetljive kože oko očiju, nakon čega ćete se osjećati i izgledati ljepše.

www.shop-medikor.hr
www.medikor.hr

